

1




Rhaco Grit P320



Wasser




300 UpM

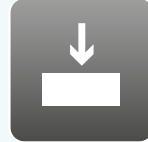

35 N




Bis plan

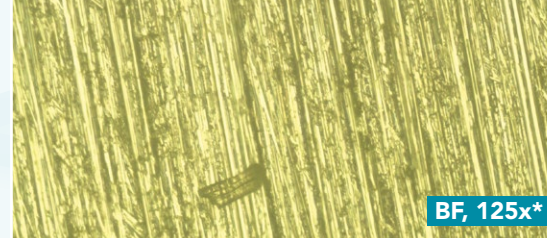

BF, 125x*

2

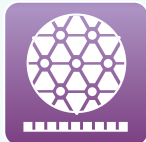


Largan 9



DiaMaxx Poly 9 µm




150 UpM

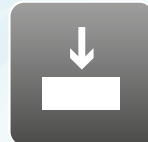

35 N



5:00 min

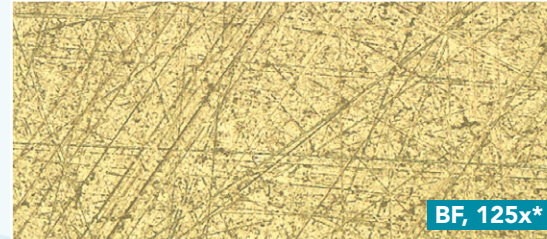

BF, 125x*

3



Napal



DiaDoublo Poly 1 µm




150 UpM



35 N



4:00 min

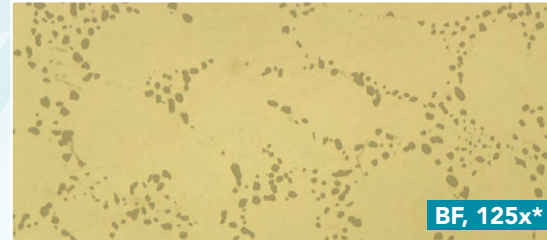

BF, 125x*

Die angegebene Präparationsdauer gilt für ein 300 mm System und 40 mm Proben-durchmesser.

Mit einem 250 mm System sollte die Dauer um 30 % erhöht werden, mit einem 200 mm System um 100 %.

Für größere Proben sollte die Kraft erhöht, für kleinere Proben reduziert werden.

Die Umdrehungsgeschwindigkeit des Probenhalters beträgt 150 UpM.

Dauer und Kraft kann, abhängig von der Maschine, variieren.

* Präparierter Werkstoff:
AlSi